

AVEA™ Filtre/Piège à eau expiratoire

Usage Unique

Mode d'emploi

Ventilation Réanimation

Installation

Remarque: Le Filtre/Piège à eau expiratoire usage unique pour ventilateur AVEA est livré non stérile, il est destiné à remplacer le bloc expiratoire réutilisable pour AVEA (filtre réutilisable, piège à eau, bocal de piège à eau et carter de montage)

1. Localiser le verrou métallique en façade avant du ventilateur en bas à gauche, faire entièrement pivoter le verrou de gauche à droite, jusqu'en butée. Insérer le Filtre/Piège à eau dans la cavité comme indiqué sur la figure 1. Vérifier que le filtre est complètement inséré dans la cavité avant de refermer le verrou.

Avertissement : Une insertion incomplète du Filtre/Piège à eau, peut provoquer une fuite sur le circuit patient.






2. Refermer complètement le verrou, pour bien sécuriser le Filtre dans le ventilateur.

Remarque : Le verrou doit pouvoir se fermer sans forcer si le Filtre est correctement inséré dans la cavité.

3. Si le verrou est complètement fermé comme indiqué sur la figure 3, le filtre est opérationnel.

4. Avant toute utilisation, veuillez clamper le tube de drainage comme indiqué à la figure 4.

Avertissement : Il est impératif de clamper correctement le tube de drainage pour éviter toutes fuites sur le circuit de ventilation.

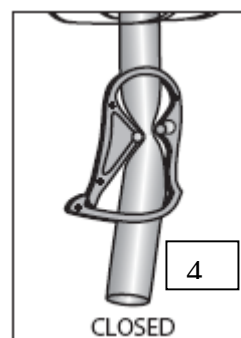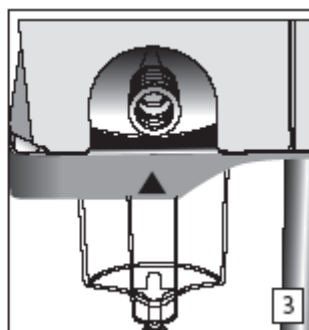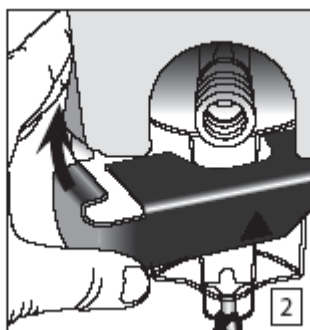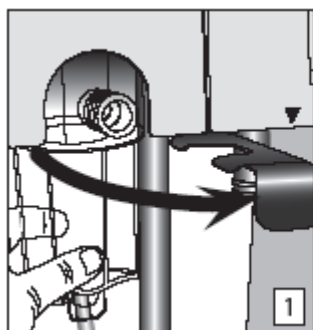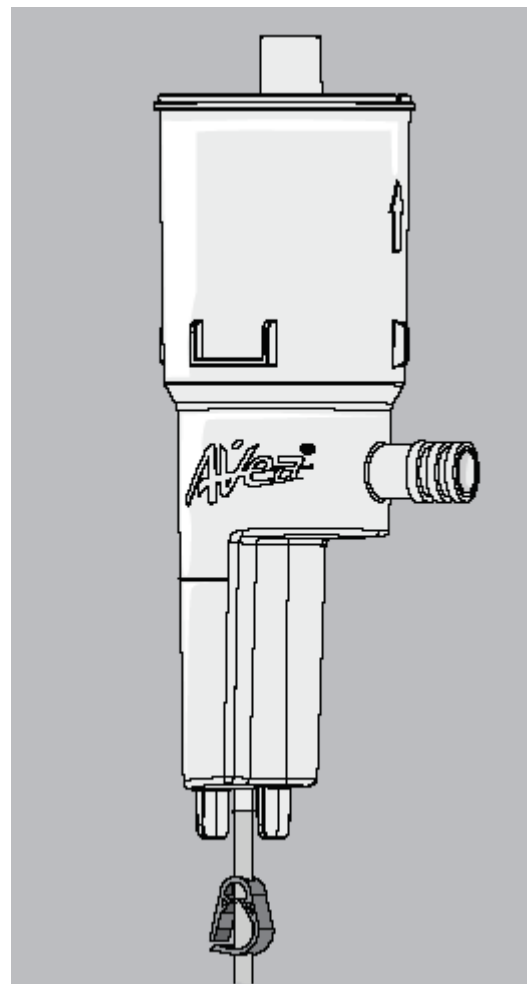

SEBAC

 **The Surgical
Company**

16, Avenue des Louvresses
92230 Gennevilliers
Tél : 01 41 47 56 56
Fax : 01 41 47 56 57
www.sebac.fr

Nettoyage

Seules les parties extérieures du filtre peuvent être nettoyées, avec une solution compatible avec des plastiques polystyrènes, tel que de l'alcool isopropyl ou des composants chlorés. Ces solutions doivent être diluées avec de l'eau, avec une concentration maximum de 1 :10.

Avertissement : La membrane filtrante ne peut se nettoyer. Le filtre est à patient unique il n'est ni stérilisable ni réutilisable.

Avertissement : Afin de ne pas altérer les propriétés de filtration et de résistance du filtre, la membrane filtrante ne doit être ni immergée ni nettoyée mécaniquement avec un instrument quel qu'il soit.

Vérification

Filtre : Vérifier visuellement que le corps du filtre et le filtre en lui-même ne présente aucune anomalie. Si c'est le cas veuillez ne pas utiliser le filtre.


Tube de drainage et clamp : Vérifier qu'il n'est pas abîmé, fonctionnel et correctement fermé.

Remplacement

Le Filtre/Piège à eau expiratoire pour AVEA est un dispositif à usage unique. Veuillez le remplacer lors de chaque changement de circuit.

Avertissement : Le Filtre/Piège à eau usage unique, ne doit pas être stérilisé ni réutilisé.

Remarque : Pour l'élimination du filtre, veuillez vous référer au protocole local de destruction ou de retraitement des déchets hospitaliers auquel adhère l'établissement utilisateur.

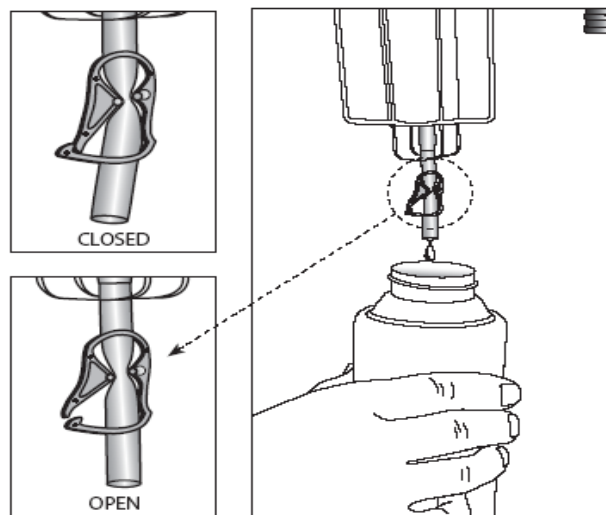

- 1 . Vérifiez régulièrement le niveau d'eau dans le réceptacle du piège à eau et vidangez le, avant que le niveau d'eau atteigne la ligne de niveau maximum.
- 2 . Pour Vidanger le piège à eau, déclamper le tube de drainage, vidanger le piège dans un réceptacle approprié, et reclipser le tube de drainage.



Indique le sens du débit d'air. Le filtre est conçu pour fonctionner dans un seul sens.



Le Filtre/Piège à eau pour AVEA est compatible avec les directives de la réglementation du matériel médical 93/42/EEC.



Usage Unique



Se référer à ces instructions

Spécifications	
Efficacité Filtration virale et antibactérienne (VFE/BFE)	Inférieur à 99,999%
Efficacité de filtration des particules (PFE)	99,97% des particules >à,3µm à 60 L/min
Connecteur d'entrée	22mm male et 15mm femelle coaxial
Connecteur de sortie	22mm male
Résistance au débit	Inférieur à 1cmH20 à 60 L/min
Fuite	Inférieur à 0,01 L/min à 140 cmH20
Dimension	9,7 cm de diamètre, 33 cm hauteur
Matériaux	Polystyrène
Volume interne	environ 500ml
Compliance	Inférieur à 0,5 ml/cmH20
Volume du piège à eau	Environ 130ml (ligne de niveau d'eau max)

SEBAC

 **The Surgical Company**

16, Avenue des Louvresses
92230 Gennevilliers
Tél : 01 41 47 56 56
Fax : 01 41 47 56 57
www.sebac.fr